


		Lees mij eerst 	Bedankt dat u zich hebt aangemeld voor ons Philips Dental+ programma. Feedback is voor ons erg belangrijk, en we stellen het zeer op prijs dat u hiervoor de tijd neemt. U hebt uw eerste kleine stap naar een nieuwe gezonde gewoonte gezet. Goed zorgen voor uw mondgezondheid is een essentieel onderdeel van uw algehele welzijn. Een slechte mondhygiëne kan leiden tot tandvleesaandoeningen, wat uw algehele gezondheid kan beïnvloeden. Het goede nieuws? Met ons programma beschikt u over de hulpmiddelen om op een snelle, eenvoudige en leuke manier nieuwe gewoonten op het gebied van mondverzorging te ontwikkelen! Uw stralende lach en gezonde tandvlees zullen u bedanken. We vinden het geweldig om te zien wat u kunt doen. U kunt het.	Bij Philips geloven we hartstochtelijk in het ontwikkelen van producten die u helpen uw mondgezondheid te verbeteren en positieve levenslange gewoonten aan te leren. Voor dit programma gebruikt u uw verbonden tandenborstel samen met een app op uw mobiele apparaat die specifiek is ontwikkeld voor het programma. Door de stappen in deze handige gids te volgen, bent u snel op de goede weg om te starten met gezonde gewoontes. Het is eenvoudig om uw tanden en tandvlees te verzorgen en uw voortgang te volgen terwijl u het doet, rechtstreeks in de app. We willen dat u zich zelfverzekerder voelt en meer controle hebt over uw mondgezondheid!	Klaar om aan de slag te gaan? Wat fijn. 
--	---	---	---	--	--

1

Zoek de unieke codes op die u van uw verzekeringsmaatschappij hebt ontvangen (deze zijn per e-mail naar u verzonden).

U hebt deze nodig om uw registratie in de app te voltooien.

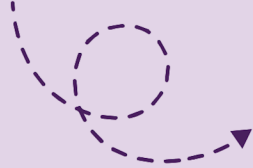

2

Download uw programma-specifieke app

Als u de Sonicare-app al op uw telefoon hebt geïnstalleerd, verwijder deze dan voordat u verdergaat.

Open de camera op uw mobiele apparaat en beweeg deze over de QR-code hier rechts. Op het scherm verschijnt een koppeling.

Volg de koppeling om de programma-specifieke app te downloaden en voltooi uw registratie. Uw tandenborstel moet in de buurt zijn om deze te synchroniseren, dus zorg ervoor dat u hem bij de hand hebt!



Als de QR-code niet werkt, ga dan naar:
<https://philipsdentalplus.app.link/onvz2023>

3

Zoek de tweezijdige visuele herinneringskaart en de bijbehorende hanger in de doos

We willen u helpen goede gewoonten te ontwikkelen. Deze kaart is een dagelijkse herinnering aan de kleine acties die een grote impact kunnen hebben. Probeer de komende dagen te oefenen.

Plaats de herinneringskaart en de tandenborstel op de plek waar u dagelijks uw tanden poetst



Nieuw bij Philips Sonicare?

Dit zijn enkele dingen waaraan u moet denken!

- Bevestig uw opzetborstel en de tandenborstel selecteert automatisch de optimale poetsmodus.
- U kunt de intensiteit verlagen door tijdens het poetsen op de instellingenknop te drukken als het in het begin te veel voor u is.
- De herinnering voor het vervangen van de opzetborstel geeft aan wanneer u een nieuwe opzetborstel nodig hebt.
- Laad uw tandenborstel na het eerste gebruik ten minste gedurende 24 uur volledig op.
- Over het algemeen duurt het ongeveer een week om te wennen aan deze nieuwe manier van poetsen.

