

Добивайтесь успеха всегда с Philips Sonicare




Наклоните головку щетки под углом **45 градусов** к десневому краю.



Придерживайтесь сигналов таймера вашей зубной щетки, чтобы перейти к новому участку для равномерной чистки.

Медленно перемещайте щетку вдоль линии десен, избегая избыточных движений

Не оказывайте давление на щетку при чистке

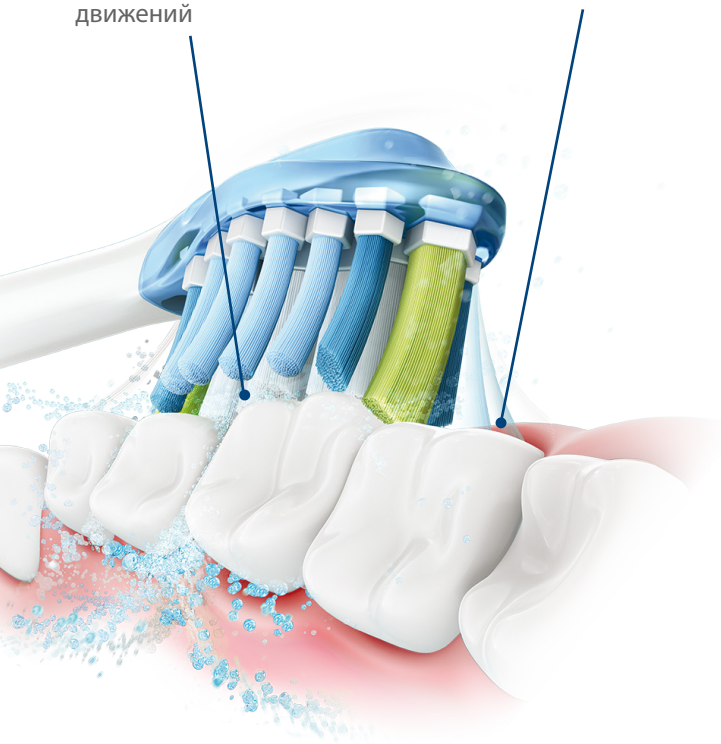

Поговорите со своим стоматологом о том, как эти продукты от Philips могут помочь правильному уходу за полостью рта.



Зубные щетки Philips Sonicare

Все зубные щетки Sonicare созданы для превосходной очистки полости рта и протестированы клинически.



Насадки Philips Sonicare All-in-One, Premium Plaque Defence и Optimal White

Клинически доказанное превосходное удаление зубного налета, что помогает снизить риск возникновения кариеса.



Зубная паста Philips Sonicare BreathRx

Зубная паста с фтором помогает предотвратить кариес при качественной и регулярной гигиене полости рта.



Ирригатор Philips Sonicare Power Flosser

До 2 раз эффективнее зубной нити в удалении налета между зубами и вдоль линии десен.*



Ваш персонализированный план лечения




* При использовании насадки Quad Stream на уровне интенсивности 8 с мануальной зубной щеткой у пациентов со средним и тяжелым гингивитом по сравнению с мануальной зубной щеткой и зубной нитью.

© 2022 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). Все права защищены. PHILIPS и щит Philips являются торговыми знаками KPNV. SONICARE и логотип Sonicare являются торговыми знаками KPNV и/или Philips Oral Healthcare, LLC. Другие торговые марки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам. www.philips.com

PHILIPS

sonicare

Кариес

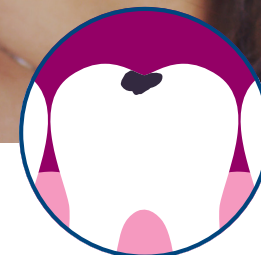

Профилактика кариеса

Что такое кариес

Когда бактерии на зубах расщепляют пищу, они вырабатывают кислоты, которые разрушают зубную эмаль. Если зубы часто подвергаются воздействию подобных кислот, это приводит к потере эмали минералов и в конечном итоге к образованию кариеса.¹

Какие факторы повышают риск развития кариеса?²



Здоровье полости рта

- Некачественная гигиена
- Рецессия десны
- Сухость во рту (ксеростомия)
- Дефекты пломбы



Диета

- Высокое содержание сахара
- Высокое содержание крахмала



Общие заболевания

- Лучевая терапия
- Нарушение питания
- Заболевания ЖКТ
- Вредные привычки

¹ <https://www.nidcr.nih.gov/health-info/tooth-decay/more-info/tooth-decay-process>
² American Dental Association. (2007). Fluoride treatments in the dental office: Extra protection for your Teeth. JADA, 138, 420.

Симптомы кариеса

- Зубная боль
- Чувствительность зубов
- Дефекты и пятна на зубах
- Боль при жевании
- Белые пятна на зубах

Знаете ли вы? Кариес не всегда сопровождается болью, особенно на ранних стадиях.



Philips Sonicare

Зубная щетка Philips Sonicare DiamondClean Smart использует передовую технологию Sonicare для обеспечения исключительной чистоты.

62k

движений в минуту

Мягкие и эффективные движения щетинок помогают удалять налет для лучшей борьбы с кариесом

Удаляет до

20

раз больше налета по сравнению с мануальной зубной щеткой*



*При использовании насадки Premium All-in-One

Маленькие шаги для лучших результатов



Зубы

Чистите зубы дважды в день в течение 2 минут. Правильно подобранная зубная щетка и техника имеют важное значение.




Десна

В зонах рецессии обязательно аккуратно очищайте вдоль линии десен.



Межзубные промежутки

Это место скопления вредных бактерий, поэтому их необходимо тщательно очищать.

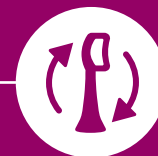

Замена

Для достижения желаемых результатов меняйте насадку каждые 3 месяца.



Чек-ап

Рекомендуется посещать стоматолога 2 раза в год, даже если у вас нет симптомов заболеваний полости рта.