

Гигиена полости рта для здоровья десен

Решения Philips Sonicare разработаны для простоты использования, чтобы помочь Вам чистить зубы и межзубные промежутки с заботой о деснах.



Бережная и эффективная чистка с Philips Sonicare ExpertClean

62K

Технология Sonicare


62 тысячи выметающих движений щетинок в минуту помогают эффективно и мягко удалять зубной налет.



SmarTimer и Brushpacer

Помогают равномерно очистить все участки за 2 минуты, как рекомендуют стоматологи.

Безупречное очищение без усилий с ирригатором Philips Sonicare Power Flosser

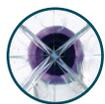

Насадка Quad Stream

Благодаря уникальной крестообразной форме создает четырех широких потоков для тщательной очистки между зубами и вдоль линии десен.



Технология Pulse Wave

Подсказывает, когда нужно переместить насадку к следующему межзубному промежутку.



Обсудите со своим стоматологом, как эти продукты Philips могут дополнить правильный уход за полостью рта.



Зубная щетка Philips Sonicare ExpertClean

Используйте режим Здоровье десен (Gum Health) с мобильным приложением Sonicare для лучших результатов чистки.



Насадка Philips Sonicare Premium Gum Care

В7 раз более здоровые десна всего за 2 недели¹ благодаря экстрамягким щетинкам, которые бережно удаляют налет вдоль линии десен.



Ирригатор Philips Sonicare Power Flosser

На 180% эффективнее зубной нити для улучшения здоровья десен².



Ваш персонализированный план лечения

1 по сравнению с мануальной зубной щеткой
2 При использовании насадки Quad Stream на уровне интенсивности 8 с мануальной зубной щеткой у пациентов со средним и тяжелым гингивитом по сравнению с мануальной зубной щеткой и зубной нитью.



© 2022 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). Все права защищены. PHILIPS и щит Philips являются торговыми знаками KPNV. SONICARE и логотип Sonicare являются торговыми знаками KPNV и/или Philips Oral Healthcare, LLC. Другие торговые марки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

PHILIPS

sonicare

Здоровье десен



Превосходное здоровье десен

Гингивит

Гингивит - это распространенный вид заболевания десен. Забота о деснах так же важна для здоровья полости рта, как и для здоровья в целом. Поговорите с Вашим стоматологом о здоровье Ваших десен.

Речь идет больше, чем об улыбке

Многие серьезные заболевания могут быть связаны со здоровьем полости рта

Диабет

Инсульт


Преждевременные роды

Сердечно-сосудистые заболевания

Симптомы гингивита

Симптомы как правило зависят от тяжести инфекции и могут включать в себя:

- Кровоточивость десен
 - Изъязвления
 - Гипертрофия десны
 - Неприятный запах изо рта
- Без лечения гингивит может привести к следующим состояниям:
- Боль при жевании
 - Потеря зубов
 - Пародонтит

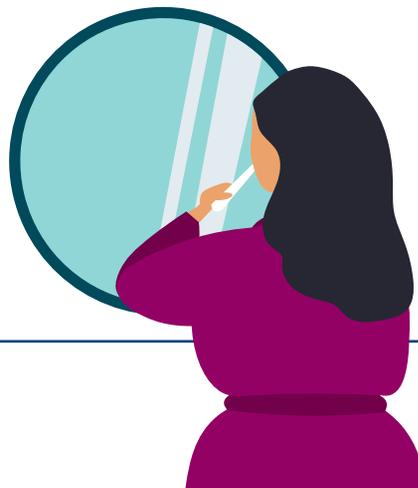

Добивайтесь успеха всегда с Philips Sonicare

Philips Sonicare ExpertClean с насадкой Premium Gum Care предоставляет значительные преимущества для достижения оптимального здоровья десен.


Советы для лучшего результата



Наклоните головку щетки под углом **45 градусов** к десневому краю, также как при использовании мануальной зубной щетки.

Медленно перемещайте щетку вдоль линии десен, избегая избыточных движений

Не оказывайте давление на щетку при чистке

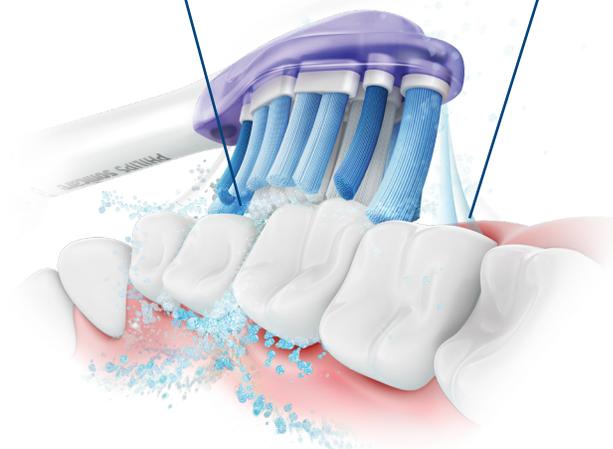

Маленькие шаги для лучших результатов

Соблюдение правильного ухода за полостью рта является необходимым условием для поддержания здоровья десен и даже для устранения симптомов начальной стадии заболевания



Зубы

Чистите зубы дважды в день в течение 2 минут. Правильно подобранная зубная щетка и техника имеют важное значение.



Десна

Обращайте особое внимание на очищение налета вдоль линии десен.



Межзубные промежутки

Это место скопления вредных бактерий, поэтому их необходимо тщательно очищать.



Ополаскиватель

Используйте ополаскиватель для полости рта, чтобы уменьшить количество бактерий, вызывающих заболевания десен.



Замена

Для достижения желаемых результатов меняйте насадку каждые 3 месяца.



Чек-ап

Рекомендуется посещать стоматолога 2 раза в год, даже если у вас нет симптомов заболеваний полости рта.