

# Kasutajamärkused

Lumify diagnostilised ultrahelisüsteemid  
20. mai 2023



4535 621 67671 Rev A


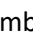

## Teave kasutajamärkuste kohta

Kasutajamärkused sisaldavad teavet, mis selgitab süsteemi teatud vastuseid, mis võivad olla valesti mõistetavad või tekitada kasutajale raskusi. Vaadake kasutajamärkused üle ja hoidke nende koopiat koos süsteemi juhenditega. Kui võimalik, hoidke kasutajamärkusi ultrahelisüsteemi lähedal.

## Märgistusteave

Hoidke oma dokumentatsiooni jaoks alles saadetisega kaasas olev *kiirjuhend*, mis sisaldab Lumify diagnostilise ultrahelisüsteemi märgistusteavet.

## Süsteemi kasutamine

- (Ainult Android-seadmed) PW Doppleri režiimis võib uuringu kiire seiskamine ja vabastamine põhjustada heli toimimise lõppemise. Mõnikord lahendab probleemi PW Doppleri režiimist väljumine ja selle uuesti avamine.
- (Ainult Android-seadmed) Seadme pööramine 2D-režiimi PW Doppleri režiimiks vahetamise ajal võib põhjustada tarkvara toimimise lõppemise.
- (Ainult Android-seadmed) Seisatud joon ei pruugi skannimiskiiruse sätte muutmisel korralikult skaleeruda.
- (Ainult Android-seadmed) Kui vaatate PW Doppleri režiimi täisekraanil horisontaalpaigutuses, katab täisekraanvaatest väljumise nupu pilt  joone überpööramise nupu pildi , kuid joone überpööramise nupu aktiveerimisala jääb pealepoole. Täisekraanvaatest väljumise nupu puudutamisel võidakse hoopis joon ümber pöörata.
- (Ainult Android-seadmed) PW Doppleri režiimis võib 2D-kujutisel esineda moonutusi, kui pärast spektraaljoonele lülitumist reguleerite valimisketast **Depth**  ja lülitute tagasi 2D-kujutise juurde.
- Juhtelemendid **Fast Flow** ja **Slow Flow** võivad värvirežiimis veidi kattuda. Seda tuleb kõige sagedamini ette 5. põlvkonna iPadi mobiilseadmete puhul horisontaalpaigutuses. See ei mõjuta juhtelementide toimivust.
- (Ainult iOS-seadmed) Kui parandate käsitsi patsiendi välja **Date of Birth** vormis **Patient Info**, põhjustab aasta kõigi nelja numbri kustutamine ja taassisestamine tõrke. Parimate tulemuste saamiseks sisestage uuesti kogu kuupäev.
- (Ainult iOS-seadmed) Navigatsiooniriba, sh juhtelement **Back**, puudub vormis **Contact Information** (millele pääseb juurde suvandi **Customer Information** kaudu jaotises **Settings**). Leheküljelt lahkumiseks peate sisestama oma kliendi teabe ja puudutama seejärel nuppu **Continue**.

- (Ainult iOS-seadmed) Lumify toitemoodul (LPM) võib minna unerežiimi, kui väljute Lumify rakendusest või lasete mobiilseadmel unerežiimi minna. Kui püüate jätkata skannimist ajal, mil LPM on unerežiimis, saate ühenduse tõrke teate. LPM-i äratamiseks vajutage LPM-i tagaküljel olevat nuppu.

## Reactsi kasutamine (ainult Android-seadmed)

Reactsi kõnele vastamine teisest Lumify seadmest võib põhjustada Lumify tarkvara ootamatu sulgumise. Selle probleemi esinemise vähendamiseks andke vastuvõtvast seadmes Lumify rakendusele juurdepääs kaamerale ja mikrofonile enne Reactsi kõne saamist.

## Ülevaatus

- Eksporditud videolõikude esitamine Windowsiga arvutis Windows Media Playeris võib põhjustada taasesituses vahesid. Selle probleemi vältimiseks kasutage muud meediumipleierit.
- (Ainult Android-seadmed) Seadme pööramine võib põhjustada märkuste kadumise.
- (Ainult Android-seadmed) M-režiimis või PW Doppleri režiimis võib täisekraanvaatele lülitumine põhjustada märkuste asukoha muutumise.
- (Ainult Android-seadmed) M-režiimis või PW Doppleri režiimis tehtud märkuste asukoht võib ülevaatus ajal muutuda.
- (Ainult iOS-seadmed) Kui kerite salvestatud uuringute pika loendi lõppu, võib ekraani serv loendi viimase uuringu ära lõigata.
- (Ainult iOS-seadmed) Uuringute, kujutiste või videolõikude eksportimisel peaksite õige toimimise ja andmeedastuse tagamiseks hoidma Lumify aktiivsena esiplaanil kuni eksportimise lõpuni.

## Süsteemi hooldus

(Ainult iOS-seadmed) Mobiilseadet iPad mini 5 ei pruugita Lumify toitemooduliga (LPM) ühendamisel laadida. Tagamaks, et LPM ja mobiilseade iPad mini 5 oleks täis laetud, laadige neid eraldi.

---

### Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
[www.philips.com/ultrasound](http://www.philips.com/ultrasound)

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Kõik õigused kaitstud. Välja antud USA-s.  
Reprodutseerimine või edasiandmine täielikult või osaliselt mis tahes vormis või mis tahes viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt või muul viisil on keelatud ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.



Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

