

# Ekspluatācijas piezīmes

Lumify diagnostikas ultrasonogrāfs  
2023. gada 20. maijs



4535 621 67811 Rev A




## Par ekspluatācijas piezīmēm

Ekspluatācijas piezīmes satur informāciju, kas precizē konkrētas sistēmas atbildes reakcijas, kuras var būt pārprotamas vai var apgrūtināt lietošanu. Pārskatiet ekspluatācijas piezīmes un saglabājiet kopiju kopā ar ierīces rokasgrāmatām. Ja nepieciešams, novietojiet ekspluatācijas piezīmes ultrasonogrāfa tuvumā.

## Informācija par etiķetēm

Saglabājiet sūtījumā ietvertu *Iso rokasgrāmatu* savai atsaucei; tajā ir ietverta informācija par Lumify diagnostikas ultrasonogrāfa etiķetēm.

## Sistēmas lietošana

- (Tikai Android ierīcēm) PW Doppler režīmā izmeklējuma ātra fiksēšana un fiksācijas atcelšana var pārtraukt audio darbību. Dažkārt šo problēmu var atrisināt, izejot no PW Doppler režīma un atkārtoti ieslēdzot to.
- (Tikai Android ierīcēm) Ja rotējat ierīci, vienlaicīgi mainot režīmu no 2D uz PW Doppler, programmatūra var pārstāt darboties.
- (Tikai Android ierīcēm) Mainot iezīmēšanas ātruma iestatījumu, fiksētā trasējuma mērogs var netikt attēlots pareizi.
- (Tikai Android ierīcēm) Skatoties PW Doppler režīmu pilnekrāna horizontālajā orientācijā, iziešanas pilnekrāna skata vadīklas  attēls aizklāj pieraksta apvēršanas  vadīklas attēlu, bet pieraksta apvēršanas vadīklas aktivizēšanas apgabals paliek augšpusē. Pieskaroties vadīklai, lai izietu no pilnekrāna skata, tā vietā var tikt apvērsts pieraksts.
- (Tikai Android ierīcēm) PW Doppler režīmā 2D attēls var tikt deformēts, ja, pārslēdzoties uz spektrālo līkni, jūs pielāgojat **Depth**  skalu un pārslēdzaties atpakaļ uz 2D attēlu.
- **Fast Flow** un **Slow Flow** vadīklas var nedaudz pārklāties krāsu režīmā. Tas visbiežāk parādās 5. paaudzes iPad mobilajās ierīcēs ainavas orientācijā. Tas neietekmē vadīklu funkcionalitāti.
- (Tikai iOS ierīcēm) Kad manuāli labojat pacienta **Date of Birth** lauku veidlapā **Patient Info**, visu četru gada ciparu notīrīšana un atkārtota ievade novedīs pie kļūdas. Lai iegūtu labākus rezultātus, atkārtoti ievadiet visu datumu.
- (Tikai iOS ierīcēm) Navigācijas josla, ieskaitot vadīklu **Back**, nav atrodamā veidlapā **Contact Information** (ja piekļūts no **Customer Information** sadaļā **Settings**). Lai izietu no lapas, ievadiet savu klienta informāciju un tad pieskarieties pie **Continue**.
- (Tikai iOS ierīcēm) Lumify barošanas modulis (LPM) var pāriet miega režīmā, ja izejat no Lumify lietojumprogrammas vai ļaujiet mobilajai ierīcei pāriet miega režīmā. Ja mēģināt turpināt skenēšanu ar LPM miega režīmā, jūs saņemat ziņojumu par savienojuma kļūdu. Lai pamodinātu LPM, nospiediet pogu uz LPM aizmugurējās daļas.

## Izmantojot Reacts (tikai Android ierīcēm)

Atbildot uz Reacts zvani no citas Lumify ierīces, Lumify programmatūra var negaidīti izslēgties. Lai samazinātu šīs problēmas iespējamību, pirms Reacts zvana saņemšanas piešķiriet uztverošās ierīces kamerai un mikrofonam piekļuvi Lumify lietotnei.

## Pārskatīšana

- Eksportēto kopu atskaņošana Windows datorā ar Windows Media Player var radīt atskaņošanas pārrāvumus. Lai izvairītos no šīs problēmas, izmantojiet citu atskaņotāju.
- (Tikai Android ierīcēm) Rotējot ierīci, anotācijas var pazust.
- (Tikai Android ierīcēm) M-režīmā vai PW Doppler režīmā pārslēdzoties uz pilnekrāna skatu, anotācijas var mainīt atrašanās vietu.
- (Tikai Android ierīcēm) Anotācijas M-mode režīmā vai PW Doppler režīmā var mainīt pozīciju Pārskatīšanā.
- (Tikai iOS ierīcēm) Ritinot līdz saglabāto izmeklējumu garā saraksta apakšdaļai, ekrāna malā varētu tikt nogriezts saraksta pēdējais izmeklējums.
- (Tikai iOS ierīcēm) Eksportējot jebkurus izmeklējumus, attēlus vai kopas, atstājiet Lumify logu aktīvu priekšplānā līdz eksportēšanas pabeigšanai, lai nodrošinātu pareizu darbību un datu pārnesi.

## Sistēmas apkope


(Tikai iOS ierīcēm) iPad mini 5 mobilo ierīci var nevarēt uzlādēt, kad tā ir savienota ar Lumify barošanas moduli (LPM). Lai būtu droši, ka LPM un iPad mini 5 mobilā ierīce pilnībā uzlādējas, lādējiet tās atsevišķi.

---

### Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
www.philips.com/ultrasound

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Visas tiesības paturētas. Publicēts ASV.  
Reproducēšana vai izplatīšana pilnībā vai daļēji jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, elektroniskā, mehāniskā vai citā veidā ir aizliegta bez autortiesību īpašnieka iepriekšējās rakstiskas piekrišanas.

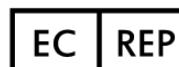

Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

