

# Prevádzkové poznámky

Diagnostický ultrazvukový systém Lumify  
20. mája 2023



4535 621 67891 Rev A

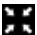


## Informácie o týchto prevádzkových poznámkach

Prevádzkové poznámky obsahujú informácie, ktoré objasňujú určité reakcie systému, ktoré môžu byť nesprávne pochopené alebo môžu spôsobiť používateľovi ťažkosti. Prevádzkové poznámky si dôkladne prečítajte a ich kópiu si odložte s príručkami k systému. V prípade potreby umiestnite prevádzkové poznámky v blízkosti ultrazvukového systému.

## Informácie o označovaní

Uchovajte si *Stručnú príručku* obsiahnutú v dodávke pre svoje záznamy. Obsahuje informácie o označovaní pre diagnostický ultrazvukový systém Lumify.

## Prevádzka systému

- (Len zariadenia so systémom Android) V režime PW Doppler môže rýchle zmrazenie a rozmrazenie vyšetrenia spôsobiť, že zvuk prestane fungovať. Ukončenie a opätovné zadanie režimu PW Doppler niekedy problém odstráni.
- (Len zariadenia so systémom Android) Otáčanie zariadenia pri prechode z režimu 2D do režimu PW Doppler môže spôsobiť, že softvér prestane fungovať.
- (Len zariadenia so systémom Android) Zmrazená stopa nemusí byť správne škálovaná, pokiaľ zmeníte nastavenie rýchlosti snímania.
- (Len zariadenia so systémom Android) Keď si prezeráte režim PW Doppler na celej obrazovke v orientácii na šírku, obraz pre ovládací prvok výstupu zo zobrazenia na celú obrazovku  zakrýva obraz pre ovládací prvok invertovania stopy , ale aktívna oblasť pre ovládací prvok invertovania stopy zostáva hore. Keď sa dotknete ovládacieho prvku, aby ste ukončili zobrazenie na celú obrazovku, stopa sa môže namiesto toho invertovať.
- (Len zariadenia so systémom Android) V režime PW Doppler môže byť 2D obraz skreslený, ak po prepnutí na spektrálnu stopu nastavíte volič **Depth**  a prepnete späť na 2D obraz.
- Ovládacie prvky funkcií **Fast Flow** a **Slow Flow** sa v režime Color môžu čiastočne prekryvať. Najčastejšie k tomu dochádza na iPadoch 5. generácie pri orientácii na šírku. Neovplyvní to funkčnosť ovládacích prvkov.
- (Iba zariadenia so systémom iOS) Keď manuálne opravíte pole **Date of Birth** pacienta vo formulári **Patient Info**, vymazaním a opätovným zadáním všetkých štyroch číslic roka dôjde k chybe. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak znova zadáte celý dátum.
- (Iba zariadenia so systémom iOS) Navigačný panel, ktorý obsahuje ovládací prvok **Back** chýba vo formulári **Contact Information** (dostanete sa k nemu cez ponuku **Customer Information** v ponuke **Settings**). Ak chcete stránku opustiť, musíte zadať svoje informácie o zákazníkovi a ťuknúť na tlačidlo **Continue**.

- (Iba zariadenia so systémom iOS) Napájací modul systému Lumify (LPM) môže prejsť do režimu spánku, ak ukončíte aplikáciu Lumify alebo umožníte mobilnému zariadeniu prejsť do režimu spánku. Ak sa pokúsite pokračovať v skenovaní, keď je LPM v režime spánku, zobrazí sa hlásenie o chybe pripojenia. Ak chcete modul LPM prebudiť, stlačte tlačidlo na jeho zadnej strane.

## Použitie funkcie Reacts (Iba zariadenia s Androidom)

Prijatie prichádzajúceho hovoru Reacts z iného zariadenia Lumify môže spôsobiť neočakávané vypnutie softvéru Lumify. Ak chcete obmedziť výskyt tohto problému, pred prijatím hovoru Reacts poskytnite aplikácii Lumify v prijímačom zariadení prístup ku kamere a mikrofónu.

## Prehliadanie

- Prehrávanie exportovaných slučiek v programe Windows Media Player na počítači so systémom Windows môže spôsobiť medzery v prehrávaní. Ak chcete predísť tomuto problému, použite iný prehrávač médií.
- (Iba zariadenia so systémom Android) Otáčanie zariadenia môže spôsobiť, že poznámky zmiznú.
- (Iba zariadenia so systémom Android) V režime M- alebo PW Doppler môže prepnutie na zobrazenie na celú obrazovku spôsobiť zmenu polohy poznámok.
- (Iba zariadenia so systémom Android) Poznámky vytvorené v režime M- alebo PW Doppler môžu pri prehliadaní zmeniť svoju polohu.
- (Iba zariadenia so systémom iOS) Keď prejdete do spodnej časti dlhého zoznamu uložených vyšetrení, posledné vyšetrenie v zozname sa nemusí na okraji obrazovky zobrazovať.
- (Iba zariadenia so systémom iOS) Keď exportujete akékoľvek vyšetrenia, obrázky alebo slučky, mali by ste nechať aplikáciu Lumify aktívnu v popredí, kým sa export nedokončí, aby sa zabezpečila správna činnosť a prenos údajov.

## Údržba systému

(Iba zariadenia so systémom iOS) Mobilné zariadenie iPad mini 5 sa nemusí dať nabíjať, pokiaľ je pripojené k napájacíemu modulu Lumify (LPM). Ak chcete mať istotu, že sú LPM a mobilné zariadenie iPad mini 5 úplne nabité, nabíjajte ich oddelene.

---

### Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA  
[www.philips.com/ultrasound](http://www.philips.com/ultrasound)

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Všetky práva vyhradené. Vydané v USA.  
Rozmnožovanie alebo šírenie tohto obsahu alebo jeho častí v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky, mechanicky či inak, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka autorských práv zakázané.



Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

