

PHILIPS

DreamStation 2

CPAP Advanced

Auto CPAP Advanced

Guida rapida per il **paziente**



Collegamento a DreamMapper

Sincronizzare il dispositivo con il tablet o il cellulare usando l'app DreamMapper, disponibile nell'App Store e su Google Play.




1

Con il dispositivo e il cellulare accesi e vicini tra loro, avviare la configurazione **Bluetooth** e l'accoppiamento in **DreamMapper**. Seguire le istruzioni per l'accoppiamento in **DreamMapper**.




2


Nella schermata della DreamStation 2 sarà visualizzato un **PIN di 6 cifre**. A seconda del telefono in uso, sarà necessario immettere il **PIN** in **DreamMapper** o toccare **"Accoppia"** sulla schermata del dispositivo entro 30 secondi per completare l'accoppiamento.

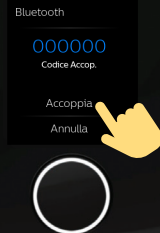

3

Lo schermo visualizza **"Accoppiamento al dispositivo"** e quindi **"Dispositivo accoppiato"**.

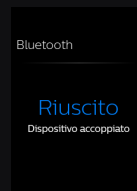

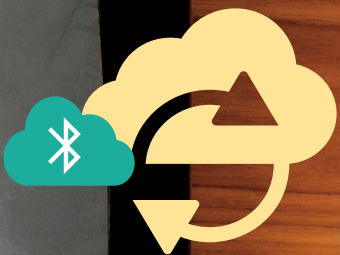

Inizio della terapia

Per iniziare la terapia, premere il **pulsante Terapia**. Un **cerchio blu** indica che la terapia è stata avviata.

Touchscreen interattivo

Icona di umidificazione

Pulsante della terapia

Pressione della terapia

Un **cerchio continuo** indica che si sta erogando alla pressione prescritta.
Un **cerchio tratteggiato** indica che si sta erogando alla pressione Ramp Plus.



Icona Ramp Plus

Icona di temperatura del tubo riscaldato

Nota: se lo schermo si oscura dopo 60 secondi di inattività, sarà sufficiente toccarlo per riattivare il dispositivo e apportare ulteriori modifiche, se necessario. In questo modo si riavvierà anche Ramp Plus.

Personalizzazione delle impostazioni

Ramp Plus

La funzione **Ramp Plus** consente di impostare una pressione iniziale confortevole durante il sonno.

1. Toccare l'icona **Ramp Plus** per visualizzare e regolare la pressione **Ramp Plus**.
2. Toccare il **simbolo + o -** fino a quando non si raggiunge un'impostazione confortevole. Le impostazioni di **Ramp Plus** possono essere disattivate o impostate a un livello compreso tra 4 e 10 cm H₂O.
3. Toccare **"Conferma"** per salvare l'impostazione.


Dopo aver impostato **Ramp Plus**, l'impostazione verrà salvata e attivata automaticamente per le future sessioni di terapia senza necessità di selezionare nuovamente l'icona **Ramp Plus**.



Umidificazione (se disponibile)

1. Toccare l'icona dell'**umidificazione** per visualizzare l'impostazione corrente.
2. Toccare nuovamente fino a raggiungere il livello di umidità desiderato. L'umidificazione può essere disattivata o impostata a un valore compreso tra 1 (minimo) e 5 (massimo).


Dopo aver impostato l'**umidificazione**, l'impostazione verrà salvata e attivata automaticamente per le future sessioni di terapia.

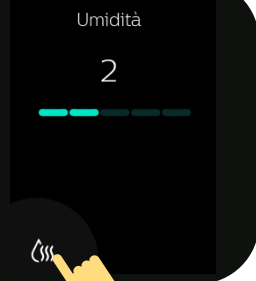

Temperatura del tubo riscaldato (se disponibile)

1. Toccare l'icona del **Tubo riscaldato** per visualizzare l'impostazione di temperatura corrente.
2. Toccare nuovamente fino a raggiungere la temperatura desiderata. Il calore può essere disattivato o impostato a un valore compreso tra 1 (minimo) e 5 (massimo).

Dopo aver impostato la **temperatura**, l'impostazione verrà salvata e attivata automaticamente per le future sessioni di terapia.

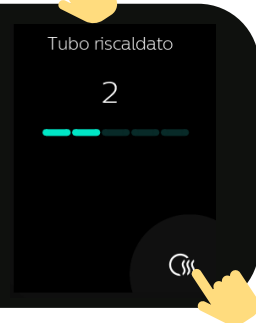

Riepilogo dei dati della terapia

Per arrestare il flusso d'aria, premere il **pulsante Terapia**. Sarà visualizzato un riepilogo dei dati della terapia. L'accesso a determinate informazioni dipende dalle impostazioni configurate dal fornitore.

Schermata Ultima seduta

Il testo in **blu** indica che, toccandolo, è possibile visualizzare maggiori informazioni o effettuare un'azione.

Ultima seduta

Orario di utilizzo **0:00**

Giorni 4 ore+ **0/21**

AHI **0.0**

Mask Fit **Mask Fit ok**

Impostazioni

1

La schermata **Orario di utilizzo** visualizza la durata, in ore e minuti, della terapia ricevuta nelle ultime 3 sessioni.

< Indietro

Orario di utilizzo

Di seguito sono riportate le ore di utilizzo degli ultimi 3 giorni.

0:00	0:00	0:00
2 giorni fa	1 giorno fa	Ultima seduta

2

La **schermata AHI** visualizza il valore dell'indice apnea-ipopnea (AHI) per il più recente intervallo temporale di 1 giorno (se abilitato dal fornitore).

< Indietro

AHI

Questo indice rappresenta il numero di eventi di apnea e ipopnea per ora di sonno.

0.0

Ultima seduta

3

La **schermata Mask Fit** visualizza il livello di adattamento della maschera durante l'ultima seduta. È anche possibile eseguire un controllo dell'adattamento della maschera. Indossare la maschera e toccare "**Avvio**" per avviare il controllo dell'adattamento della maschera.

< Indietro

Mask Fit

È possibile verificare l'adattamento della maschera prima di iniziare la terapia.

Mask Fit ok

Ultima seduta

Avvio

Impostazioni

Comfort, dispositivo e dati

L'accesso a determinate informazioni dipende dalle impostazioni configurate dal fornitore.

1

Per regolare le impostazioni e accedere a informazioni aggiuntive, toccare "Impostazioni".

Ultima seduta

Orario di utilizzo 0:00

Giorni 4 ore+ 0/21

AHI 0.0

Mask Fit Mask Fit ok

Impostazioni

2

Regolare le impostazioni Comfort disponibili. Il testo in blu indica che, toccandolo, è possibile apportare modifiche.

- a. Tempo e pressione Ramp Plus
- b. Umidità
- c. Tubo riscaldato (se disponibile)
- d. Misura del tubo
- e. FLEX


< Indietro

Comfort

 Ramp+ 15 Min., 4.0

 Umidità Off

 Tubo riscaldato Off

 FLEX 3

3

Scorrere verso l'alto per visualizzare ulteriori informazioni sul dispositivo, ad esempio la regolazione della modalità aereo, la disattivazione degli accoppiamenti Bluetooth e la reimpostazione di ora o lingua.

Toccare il testo in **blu** per apportare modifiche. È inoltre possibile visualizzare il numero di serie del dispositivo, la versione software e lo stato del modem.

< Indietro

Dispositivo

Modo aereo Off

Bluetooth 4 Accoppiato

Tempo 10:00 PM

Lingua Italiano

SN D0SIM00000010A

4

Toccare "Visualizza report" per selezionare un intervallo di date e visualizzare ulteriori riepiloghi dei dati della terapia.

Per uscire dalle **impostazioni** in qualsiasi momento, toccare "Indietro" per tornare alla **schermata Ultima seduta**.

< Indietro

SN D0SIM00000010A

Software D1.0.1.3695

Stato modem 10/30/00

Visualizza report

Consultare il Manuale utente per informazioni dettagliate sulla risoluzione dei problemi.

Pulizia e manutenzione

Eeguire le necessarie procedure di pulizia con cadenza regolare è fondamentale non solo per mantenere il dispositivo e i componenti in buone condizioni operative, ma anche per tutelare la salute dell'operatore.


Serbatoio dell'acqua, guarnizione e coperchio dell'umidificatore

Pulire quotidianamente con acqua e un detergente per stoviglie delicato.



Tubi e adattatori


Pulire ogni settimana con acqua e un detergente per stoviglie delicato.

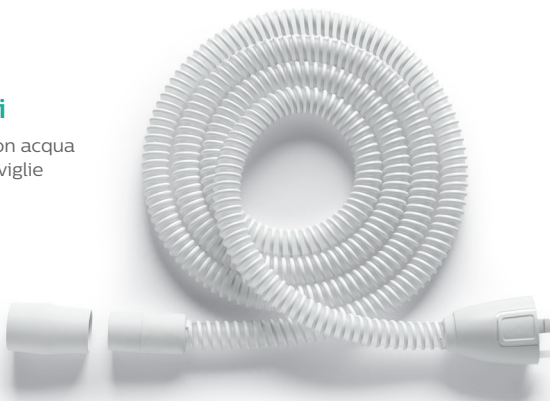

Filtri

Sciacquare il filtro grigio riutilizzabile ogni due settimane con acqua.

Non sciacquare il filtro blu monouso.

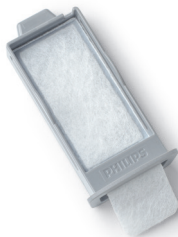

Consultare il Manuale utente per informazioni dettagliate sulla cura e sulla pulizia.



© 2021 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I marchi di fabbrica sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi titolari.

www.philips.com/respironics



Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA



Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Germania



1151720
1151720 R00
RWS 04/26/2021
Italian