

# Sami-lääkesumuttimen käyttöohjeet


Lääkesumutin muuttaa nestemäisen lääkkeen aerosoliksi, jonka voit hengittää syvälle keuhkoihin. Tucker-kilpikonna käyttää omaa sumutinta kotona ollessaan.

## Valmistautuminen

**1** Aseta lääkesumutin pöydälle.



**2** Kytke lääkesumutin pistorasiaan.

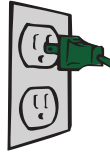


**3** Kytke letkun toinen pää lääkekuppiin ja toinen lääkesumuttimeen




## Lääkkeen ottaminen

**4** Kaada lääke lääkekuppiin.

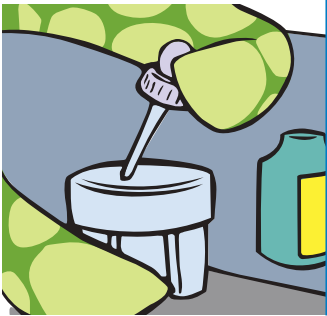


**5** Kytke lääkesumuttimen virta ja tarkista, että suukappaleesta tulee sumua.

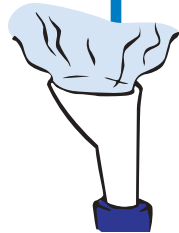

**6** Istu selkä suorana. Aseta suukappale suuhusi ja hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. Jos käytät maskia, voit hengittää sisään ja ulos samalla tavalla.



**7** Kun sumuttimen ääni muuttuu ja alkaa kuulua porinaa, voit lopettaa hoidon. Katkaise lääkesumuttimen virta.

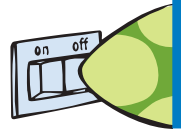

## Kompressorin puhdistaminen

**1** Irrota lääkesumuttimen sähköjohto sekä letku puhdistuksen ajaksi.

**2** Tarkista suodatin kerran viikossa ja vaihda tarvittaessa.




**3** Pyyhi kompressorin ulkopinnat kerran kuukaudessa kostealla liinalla.



**4** Säilytä osat huolellisesti kuivassa paikassa.

## Sumuttimen puhdistaminen

**1** Irrota letku ja lääkekuppi jokaisen käyttökerran jälkeen.

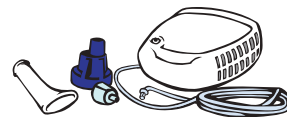

**2** Pese lääkekupin osat lämpimällä saippuvedellä.

**3** Huuhtele puhtaalla vedellä ja anna kuivua.

**Jos sinulla on uudelleenkäyttävä (vaaleansininen) sumutin**

– Keitä kaikkia osia (pois lukien letku tai kasvomaski) kerran viikossa 10 minuutin ajan vedessä, jossa on 2–3 tippaa nestemäistä astianpesuainetta.



**Philips Healthcare on osa  
Royal Philips -yhtiötä.**

**Yhteystiedot**

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

**Aasia**

+49 7031 463 2254

**Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka**

+49 7031 463 2254

**Latinalainen Amerikka**

+55 11 2125 0744

**Pohjois-Amerikka**

+1 425 487 7000

+1 800 285 5585 (ilmaispuhelu Yhdysvalloissa)

Respironics Respiratory Drug  
Delivery (UK) Ltd  
Chichester Business Park, City Fields Way  
Tangmere, Chichester P020 2FT  
Iso-Britannia

**Asiakaspalvelu**

+1 724 387 4000

+1 800 345 6443 (ilmaispuhelu Yhdysvalloissa)

**Philips Respironics Aasian**

ja Tyynenmeren alue

+65 6882 5282

**Philips Respironics Australia**

+61 (2) 9947 0440

+1300 766 488 (ilmaispuhelu Australiassa)

**Philips Respironics Kiina**

+86 400 828 6665

+86 800 828 6665

**Philips Respironics Saksa**

+49 8152 93 06 0

**Philips Suomi**

+358 (0)9 61580400

**Philips Respironics Ranska**

+33 2 51 89 36 00

**Philips Respironics Italia**

+39 039 203 1

**Philips Respironics Ruotsi**

+46 8 120 45 900

**Philips Respironics Sveitsi**

+41 6 27 45 17 50

**Philips Respironics Iso-Britannia**

+44 800 1300 845

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

Respironics, Sami the Seal ja Tucker the Turtle ovat  
Koninklijke Philips N.V.:n ja sen tytäryhtiöiden  
tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.



Lisätietoja on osoitteessa [www.philips.com/asthma](http://www.philips.com/asthma)



© 2018 Koninklijke Philips N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips Healthcare varaa oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja/tai lopettaa jonkin tuotteen valmistuksen milloin tahansa ilman mitään velvoitetta ja siitä erikseen ilmoittamatta eikä ole vastuussa mistään tämän julkaisun käytöstä johtuvista seurauksista.

KS 8/10/18 PN1552045