

PHILIPS

RESPIRONICS

DreamStation

Sistema de terapia
do sono

Redescubra os
seus **sonhos**



Natural. Confortável. Durma.

DreamStation suporta o uso a longo prazo por pacientes, criando novas possibilidades para o seu negócio

Design voltado para o paciente

DreamStation foi projetada com feedback de centenas de pacientes para fornecer uma experiência com CPAP mais simples para auxiliar o uso aos pacientes novos e experientes em terapias a longo prazo. Um conjunto de ferramentas intuitivas pode ser personalizado por profissionais de saúde para escolher a melhor solução para cada paciente.

Aclimatando pacientes nos primeiros dias de terapia

EZ-Start pode ajudar pacientes a se adaptarem gradualmente à pressão prescrita de terapia usando um algoritmo inovador de aclimatização de pressão com ajustes automáticos, personalizados para pressão de CPAP durante os primeiros 30 dias.

SmartRamp permite que os usuários adormeçam com pressões mais baixas do que o modo de rampa padrão. A pressão do ar permanece baixa até que o paciente tenha um evento respiratório obstrutivo. Neste momento SmartRamp responde com nosso algoritmo automático patenteadado para corrigir as apneias do paciente.

Faça progressos todos os dias


Todas as manhãs, os pacientes recebem um resumo do progresso para motivá-los a seguirem suas terapias corretamente. O visor intuitivo mostra uma tendência simples de suas horas de uso noturnas, seguida de um resumo mensal das últimas 30 "boas noites de sono" que tenham mais de 4 horas de uso.

O sucesso da terapia de sono* ao alcance dos seus pacientes.



My Info

1-Day	7-Day	30-Day
8.0	7.2	6.5
Therapy Hours		

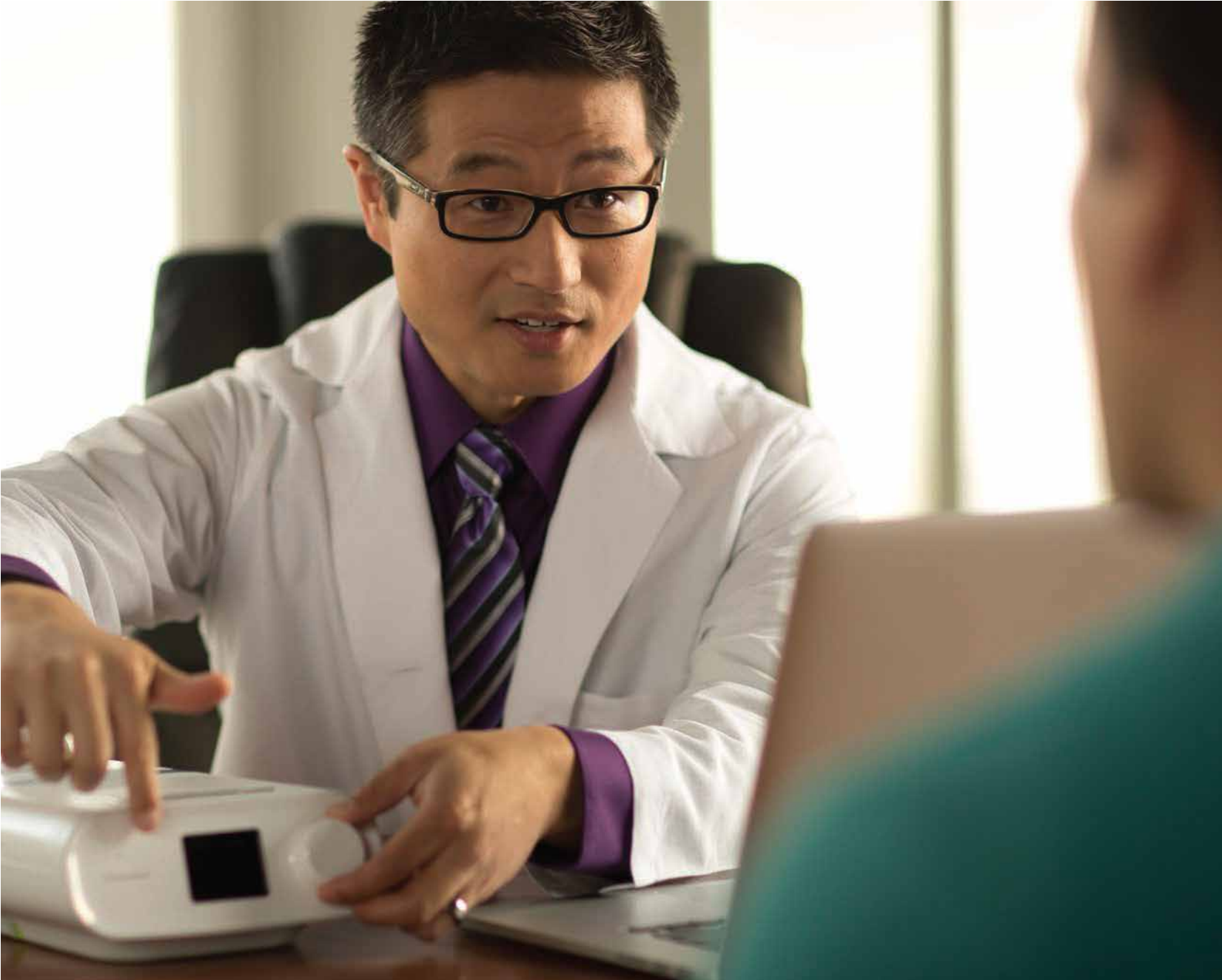

Reduzir ajustes manuais

Performance Check simplifica a avaliação do dispositivo em repouso para fácil solução remota de problemas. Projetado para reduzir o tempo e frustração envolvidos na solução de problemas do dispositivo, esta ferramenta robusta permite que você oriente o paciente por meio de um diagnóstico remoto fácil, resultando em um simples resultado de "Aprovado/Falha" para determinar se o dispositivo tem de ser encaminhado para o serviço.

Performance Check pode também gerar um relatório por meio do software de gerenciamento de pacientes Encore em qualquer lugar, permitindo que você solucione as preocupações dos pacientes.

De acordo com nossa pesquisa, 25% dos dispositivos devolvidos estavam operando normalmente.* A verificação de desempenho é projetada para ajudar a reduzir o número de dispositivos normalmente funcionais que são devolvidos para serviço, economizando tempo e custos de entrega.

DreamStation pode ajustar-se automaticamente à evolução das necessidades dos pacientes, ajudando a reduzir as dispendiosas visitas em casa e fazendo com que você focalize sua atenção onde necessário.



CPAP-Check

Verifica o usuário, a cada 30 horas para determinar se a pressão de CPAP é ideal. Se não, ele automaticamente se ajusta para atender a evolução das necessidades do paciente.



Auto-Trial

Oferece terapia em modo CPAP Auto respiração a respiração por um período total de até 30 dias por paciente. Transições para CPAP ou modo CPAP-Check ao fim do período de Auto-Trial.



Opti-Start

Fornecer a pressão inicial ideal que pode melhorar o conforto do paciente e reduzir a probabilidade de eventos residuais no início da terapia.

* Pesquisa Philips, 2015, dados em arquivo

DreamStation oferece um design elegante e discreto. Sua tela de cores vibrantes exibe o progresso diário e apresenta menu fácil de usar.

O visor frontal e conexão com o tubo na parte superior do umidificador do DreamStation facilita a sua operação por pacientes enquanto estiverem deitados ou sentados na cama. E é pequeno e leve, tornando mais fácil de levar em viagens.

**30%
menor**

DreamStation é 30% menor do que o PAP Aironse10.*

**40%
mais leve**

DreamStation é quase 40% mais leve que o PAP Aironse10.*

**63%
mais silencioso**

DreamStation é 63% mais silencioso que ResMed Aironse10.**

Opinião de **usuários DreamStation**

"Um belo equipamento! Seu desenho moderno, não parece um produto médico. É mais silencioso, também."

"Eu gostei assim que o abri! Eu gostei do jeito que foi disposto e do tamanho — era pequeno, fácil de caber em uma mesa com abajur e meu telefone. "

* Comparação interna Philips, 2015, dados em arquivo

** Testes de bancada acústica por Orfield Laboratories, Inc. avaliando dispositivos de terapia da Estação de Sonhos da Philips Respironics e ResMed Aironse10 PAP



Visão orientada **Premium**

Sistema de menu intuitivo

Menu de gráficos inspirado na navegação do smartphone para facilitar o uso

Sensor de luz ambiente

Ajusta automaticamente o brilho da tela para visualização diurna ou noturna



Feedback de progresso diário

Exibe resultados das 3 noites anteriores de terapia para acompanhar o progresso

**Conexão do tubo
na parte superior**

gira 180° para liberdade
de movimentos

Umidificador destacável

O umidificador se separa
para carregar menos peso

Design simplificado


Fácil acesso à câmara
de água para
enchimento e limpeza

**Sistema de filtragem
de ar de duas fases**

Filtro ultrafino fornece
filtragem adicional de
partículas muito finas

Cartão SD

Compartilha facilmente
dados do sono com a
equipe de cuidados

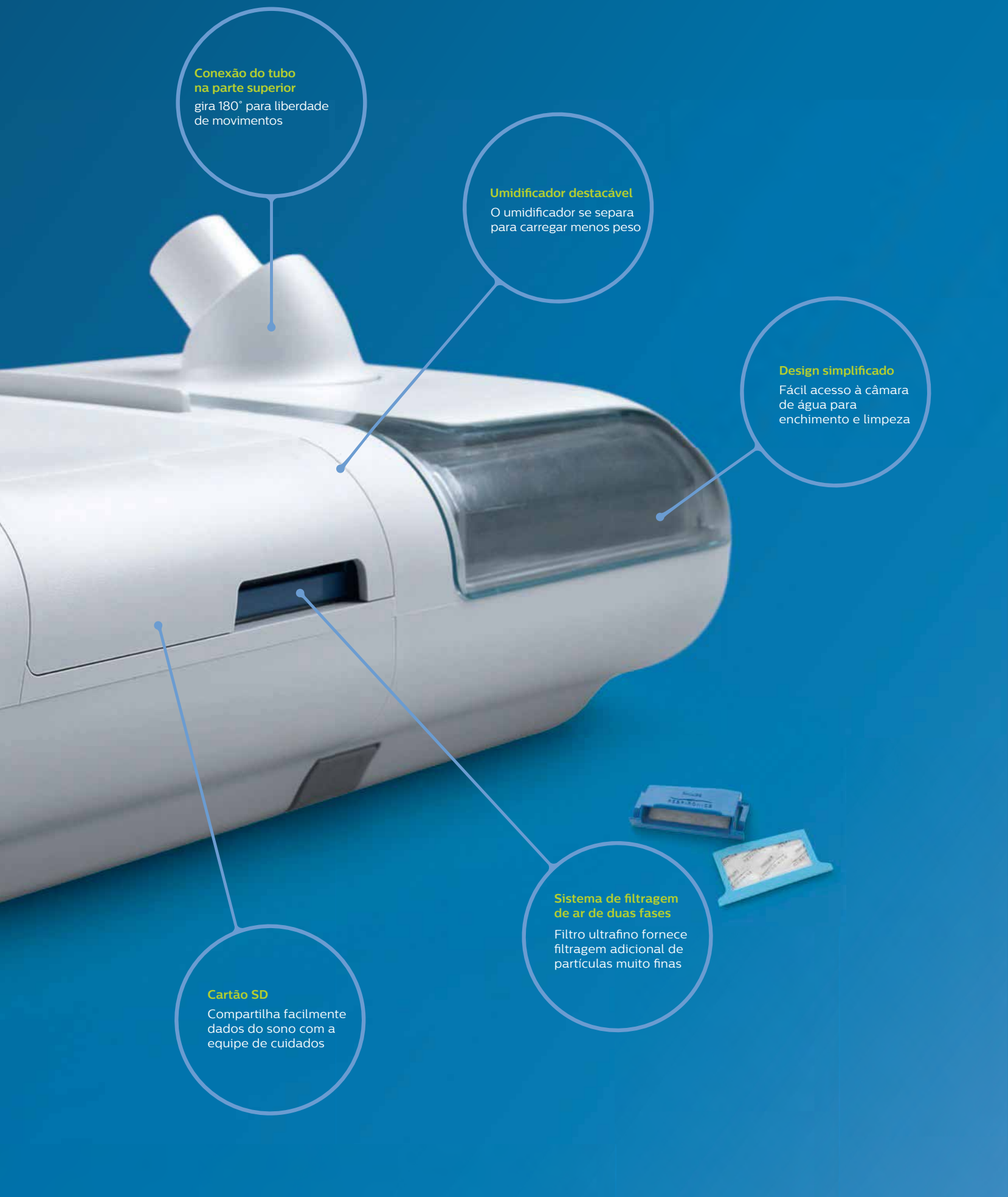

Informações sobre pedidos

DreamStation CPAP Auto

Número da peça

DreamStation CPAP Auto

BRX5045S18

DreamStation CPAP Auto
+ Humidificador + Modem

BRX504H18C

DreamStation BiPAP Auto

Número da peça

DreamStation BiPAP Auto

BRX700518

DreamStation BiPAP Auto
+ Humidificador + Modem

BRX700H18C

Umidificação

Número da peça

Umidificador DreamStation

Câmara de água DreamStation

1122520

Fonte de alimentação

Número da peça

DreamStation fonte de alimentação 80 watts

1118499

Cabo de alimentação

1005894

Tubos

Número da peça

Tubo de 15mm Padrão – DreamStation

PR15

Tubo aquecido de 15mm

HT15

Filtros

Número da peça

Filtro de pólen, reutilizável (1 por pacote)

1122446

Filtro ultrafino descartável (1 por pacote)

1122447

Filtro ultrafino descartável (2 por pacote)

1122518

Acessórios

Número da peça

Módulo Link

1120293

Oxímetro Nonin

1121694

Sensor de dedo reutilizável (clipe)

936

Sensor de oximetria de dedo, adulto, flex

953

Sensor de dedo reutilizável (modelo Soft)

1062050

Acessórios de viagem

Número da peça

Mala de transporte DreamStation

1121162

Cabo DC blindado

1120746

Sistema de cabo DC de energia blindado 12V
(inclui cabo DC blindado e cabo adaptador
de bateria)

1120747



Parte da **Dream Family**

DreamStation faz parte da Dream Family da Philips Respironics. A Dream Family oferece tecnologia de terapia do sono inovadora e abrangente, como nossa máscara subnasal DreamWear.

Ligue 1-800-345-6443 para mais informações.



Marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips N.V.
(Royal Philips) ou de seus respectivos proprietários

www.philips.com

Broudy EB 23/09/15 MCI 4106967
1010 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668
800-345-6443 • 724-387-4000