

Masque de traitement Philips 3100 NC



Informations de commande

| | |
|-----------------------------------------------|---------|
| Masque de traitement 3100 NC - FitPack XS/S/M | 1144608 |
| Masque de traitement 3100 NC, taille XS | 1145459 |
| Masque de traitement 3100 NC, taille S | 1145460 |
| Masque de traitement 3100 NC, taille M | 1145461 |
| Masque de traitement 3100 NC, taille MW | 1145462 |
| Masque de traitement 3100 NC, taille L | 1145463 |
| Coussin taille XS - 3100 NC | 1145064 |
| Coussin taille S - 3100 NC | 1145065 |
| Coussin taille M - 3100 NC | 1145066 |
| Coussin taille L - 3100 NC | 1145067 |
| Coussin taille MW - 3100 NC | 1145068 |
| Cadre 3100 NC | 1145074 |
| Harnais 3100 NC | 1145075 |



* Versus les masques nasaux Philips. Basé sur l'analyse des dimensions des masques nasaux et narinaires Philips disponibles aux USA en date du 01/04/2021

Attention : certains dispositifs médicaux risquent d'être affectés par les champs magnétiques. Il est nécessaire de maintenir une distance d'au moins 50 mm entre les fixations magnétiques de ce masque et tout dispositif médical actif, en portant une attention particulière aux dispositifs implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Ne pas utiliser ce dispositif dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou à proximité d'un tel équipement.

Les masques de traitement Philips 3100 NC sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TUV SUD (CE0123). Ils sont destinés aux patients âgés de + de 7 ans (et >18,2kg) pour qui un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression a été prescrit. Ces dispositifs font l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consulter la LPPR. Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.

Date de création : Septembre 2021. CA 09/28/2021 PN4960892

©2021 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs fabricants respectifs.

www.philips.com

PHILIPS

Masque de traitement

3100 NC

Nasal contact minimal



Tout s'enclenche dès le début !

Un masque de première intention qui fait du confort une priorité

Discret et innovant, le masque de traitement Philips 3100 NC, avec son harnais réglable, est conçu pour aider vos patients à obtenir le bon ajustement tous les soirs.



Facilité d'utilisation

Des aimants innovants polarisés, dans le coussin et le cadre, permettent un assemblage sans effort du coussin au cadre.³ Lorsque les patients sentent les aimants s'enclencher, ils peuvent être sûrs que leur coussin est correctement attaché. Les marqueurs d'orientation pour le placement sur la tête sont conçus pour une manipulation intuitive qui minimise les erreurs pour lesquelles vous recevez parfois des appels, vous faisant ainsi gagner du temps.



Ajustement confortable

Le harnais réglable garantit que les patients puissent obtenir un ajustement personnalisé qui reste constant tout au long du traitement.¹ Le son silencieux, la petite taille et le poids léger du masque de traitement Philips 3100 NC sont conçus pour être moins perturbants pour les patients et leurs partenaires de lit.^{1,4}



Efficacité opérationnelle

Le masque de traitement Philips 3100 NC vous permet d'optimiser vos ressources en réduisant le temps de manipulation nécessaire pour la mise en place du masque et les changements de taille. Les coussins sont disponibles en tailles XS, S, M et L.



Les patients ont trouvé le masque de traitement Philips 3100 NC moins intimidant que leur masque prescrit¹

¹. Analyse après 10 jours d'utilisation des données de l'essai de préférence patient de juillet 2020 n=123. Les masques prescrits incluaient Wisp, Activa, AirFit N10, AirFit N20, ComfortGel Blue Nasal, EasyLife, Eson, Eson 2, Mirage FX, Pico, TrueBlue.

². Analyse des données de l'essai clinique Facilité d'utilisation et première impression de juin 2020 où n=31. Les masques de comparaison étaient le ResMed AirFit P10 et ResMed AirFit N30.

³. Analyse des données de l'essai clinique Facilité d'utilisation et première impression de juin 2020 - tâche facultative avec les yeux bandés où n=27. Comparaison des masques étaient le ResMed AirFit P10 et le ResMed AirFit N30.

⁴. Basé sur une analyse technique de la taille et du poids des masques de traitement Philips 3100 NC, Resmed AirFit N30 et AirFit P10.


Masque de traitement Philips 3100 NC Guide de mise en place patient

Nasal à contact minimum



1

Pour des performances optimales, utiliser le plus petit coussin qui s'adapte au nez. Un gabarit aide à déterminer la bonne taille de coussin (XS, S, M ou L). Les symboles L et R indiquent respectivement les côtés gauche (Left) et droit (Right) du masque.

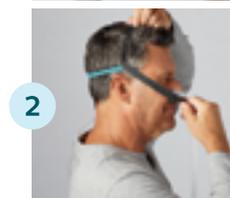


2

Tenir le coussin contre le nez d'une main, puis tirer les sangles du harnais par-dessus la tête.



3

L'ouverture du coussin sera directement sous les narines. Le nez ne doit pas être à l'intérieur de l'ouverture du coussin.

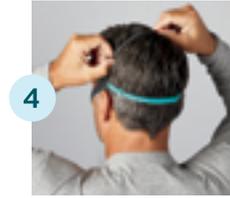


4

Utiliser les curseurs pour ajuster la sangle supérieure du harnais. Tirer le curseur vers la gauche ou la droite pour serrer ou desserrer.



5

Ajuster la sangle inférieure du harnais.

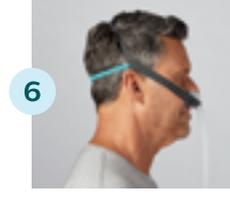

6

Le masque doit s'adapter librement et confortablement contre le visage.