

PHILIPS

Therapy Mask System

3100 NC
3100 SP

Nasal Cradle
Silicone Pillows

Alles zit goed, het klikt meteen



© 2023 Koninklijke Philips N.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CAH 31/01/2023, PN6844015 - Therapy Mask System
3100 B2B Sales Aid Brochure, Dutch, MCI 4110223 v02
1010 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, USA
+1 724 387 4000

www.philips.com/respironics

Het masker met de focus op comfort

Met elementen als het kleine formaat en het innovatieve ontwerp, is het ontwerp van de Philips Therapy Mask 3100 NC en 3100 SP met verstelbare hoofdband erop gericht te zorgen uw patiënten elke nacht comfortabeler te laten slapen dankzij een prettige pasvorm.^{1,2,3}

Het is het enige⁷ CPAP-masker met de slangaansluiting aan de voorkant (tube-in-front) waarmee op hetzelfde frame kan worden afgewisseld tussen een nasal cradle-kussen voor onder de neus en een Silicone Pillows-kussen. Het Philips Therapy Mask 3100 NC en de 3100 SP is gemakkelijk in gebruik, maakt weinig geluid en draagt comfortabel, perfect voor een goede nachtrust.^{1,2,3}



Gebruiksgemak

Door het gebruik van innovatieve, gepolariseerde magneten in het kussen en het frame is het bevestigen van de kussens op het frame heel eenvoudig.⁴ Als de patiënt de magneten op hun plaats voelt klikken, kan hij/zij erop vertrouwen dat het kussen goed bevestigd is. Het intuïtieve ontwerp met oriëntatiemarkeringen voor plaatsing op het hoofd (op de hoofdband) zorgt ervoor dat er minder applicatiemaskerfouten plaatsvinden bij de patiënt, die tot terugroepen leiden. Dit bespaart u tijd.



Een comfortabele pasvorm

De meeste onderzochte patiënten gaven aan dat ze met de verstelbare hoofdbanden van de 3100 NC en 3100 SP elke nacht de juiste pasvorm van het masker ervaren.^{1,2} Met het innovatieve CPAP-masker met de slangaansluiting aan de voorkant kunnen patiënten gemakkelijk wisselen tussen een nasal cradle-kussen voor onder de neus of een Silicone Pillows-kussen, in combinatie met hetzelfde frame. Zo kunnen patiënten kiezen wat voor hen goed voelt.^{1,2,4} Door het geringe geluid, de kleine afmetingen en het lichte gewicht van de 3100 NC en 3100 SP is het systeem minder storend voor patiënten.^{5,6}



Een grote meerwaarde

Het Philips Therapy Masker 3100 NC en 3100 SP creëert een bepaalde mate van efficiëntie met zijn unieke functies, waardoor het minder tijd kost het masker in te stellen en het minder vaak aangepast hoeft te worden. Doordat je kunt kiezen uit een nasal cradle-kussen voor onder de neus en Silicone Pillows-kussens met dezelfde maatverdeling en op hetzelfde frame, kunnen patiënten van kussentype wisselen zonder dat ze een geheel nieuw masker hoeven aan te meten. Dit kan niet alleen de kosten voor patiënten helpen verminderen, maar betekent ook minder inventaris en kosten voor vertegenwoordigers in medische apparatuur.



Patiënten vonden het Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC en 3100 SP minder intimiderend dan hun voorgeschreven masker^{1,2}

¹Analyse na 10 dagen gebruik van gegevens uit de Nasal Patient Preference-studie van juli 2020 n=123. Voorgeschreven maskers zijn Wisp, Activa, AirFit N10, AirFit N20, ComfortGel Blue Nasal, EasyLife, Eson, Eson 2, Mirage FX, Pico, TrueBlue.

²Analyse na 10 dagen gebruik van de gegevens uit de Pillows Patient Preference-studie van juli 2020 n=113. Voorgeschreven maskers zijn o.a. AirFit P10, Brevida, Nuance/Nuance Pro, Opus, Pilairo, en Swift/Swift FX/Swift LT.

³Gegevensanalyse van de Clinician Ease of Use and First Impression-studie van juni 2020 waarbij n=31. Vergelijkingsmaskers waren de ResMed AirFit P10 en de ResMed AirFit N30.


⁴Gegevensanalyse van de Clinician Ease of Use and First Impression-studie van juni 2020 - optioneel geblindeerd onderdeel waarbij n=27. Vergelijkingsmaskers waren de ResMed AirFit P10 en de ResMed AirFit N30.

⁵Gebaseerd op technische analyse van de afmetingen en het gewicht van het Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC en 3100 SP, AirFit N30- en AirFit P10- maskers.

⁶Volgens het Design History File werden de Philips Therapy Masks 3100 NC en 3100 SP ontworpen met specifieke kenmerken en voordelen, waaronder correlerende maten tussen kussentypes, comfort, minimale afmetingen, verstelbare hoofdband, geluid en gebruiksgemak.

⁷Vergeleken met toonaangevende merken CPAP-maskers.

Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC en 3100 SP

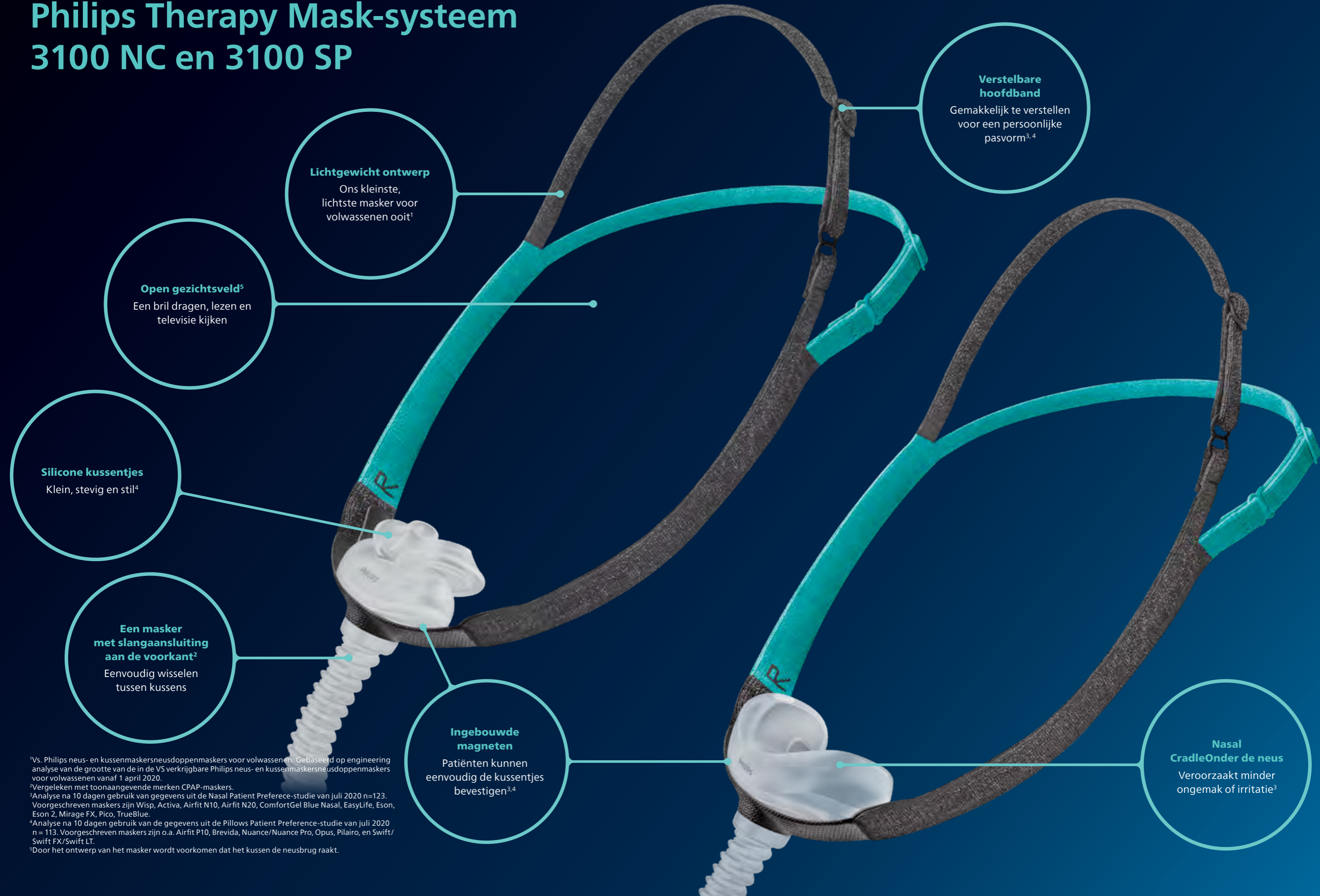

Verstelbare hoofdband

Gemakkelijk te verstellen
voor een persoonlijke
pasvorm^{3,4}

Lichtgewicht ontwerp

Ons kleinste,
lichtste masker voor
volwassenen ooit¹

Open gezichtsveld⁵

Een bril dragen, lezen en
televisie kijken

Silicone kussentjes

Klein, stevig en stil⁴

Een masker met slangaansluiting aan de voorkant²

Eenvoudig wisselen
tussen kussens

Ingebouwde magneten

Patiënten kunnen
eenvoudig de kussentjes
bevestigen^{3,4}

Nasal CradleOnder de neus

Veroorzaakt minder
ongemak of irritatie³

¹Vs. Philips neus- en kussenmaskersneusdoppenmaskers voor volwassenen. Gebaseerd op engineering analyse van de grootte van de in de VS verkrijgbare Philips neus- en kussenmaskersneusdoppenmaskers voor volwassenen vanaf 1 april 2020.

²Vergeleken met toonaangevende merken CPAP-maskers.

³Analyse na 10 dagen gebruik van gegevens uit de Nasal Patient Preference-studie van juli 2020 n=123. Voorgeschreven maskers zijn Wisp, Activa, Airfit N10, Airfit N20, ComfortGel Blue Nasal, EasyLife, Eson, Eson 2, Mirage FX, Pico, TrueBlue.

⁴Analyse na 10 dagen gebruik van de gegevens uit de Pillows Patient Preference-studie van juli 2020 n= 113. Voorgeschreven maskers zijn o.a. Airfit P10, Brevida, Nuance/Nuance Pro, Opus, Pilairo, en Swift/Swift FX/Swift LT.

⁵Door het ontwerp van het masker wordt voorkomen dat het kussen de neusbrug raakt.

Twee soorten kussens, één maskerframe

Het Philips Therapy Masker 3100 NC en 3100 SP is een innovatief CPAP-masker met de slangaansluiting aan de voorkant, waarmee u en uw patiënten kunnen wisselen tussen een nasal cradle-kussen voor onder de neus aan de voorkant en de Silicone Pillows-kussens, maar toch hetzelfde frame kunnen gebruiken. Door het gebruik van innovatieve, gepolariseerde magneten in het kussen en het frame is het bevestigen van de kussens op het frame heel eenvoudig.¹ Als de patiënt de magneten op hun plaats voelt klikken, kan hij/zij erop vertrouwen dat het kussen goed bevestigd is. Het intuïtieve ontwerp met oriëntatiemarkeringen voor plaatsing op het hoofd op de hoofdband zorgt ervoor dat er minder maskerfouten plaatsvinden bij de patiënt, die tot terugroepen leiden. Dit bespaart u tijd.



Het Silicone Pillows-kussen, ontwikkeld met behulp van gegevens uit 3D gezichtsscantechnologie, is zo ontworpen dat het geschikt is voor verschillende vormen neusgaten.



Het nasal cradle-kussen voor onder de neus heeft een minimale vormgeving die pijn over de neusbrug wegneemt.²



Artsen zeggen dat het Philips Therapy Masker 3100 SP gemakkelijker te gebruiken is dan het meest gebruikte neusdoppenmerk³

¹Analyse van gegevens uit de Clinician Ease of Use and First Impression-studie van juni 2020 - optionele geblindeerde taak waarbij n=27. Vergelijkingsmaskers waren de ResMed AirFit P10 en de ResMed AirFit N30.

²Door het ontwerp van het masker wordt voorkomen dat het kussen de neusbrug raakt.
³Bij n=31 RT's en ST's, vs ResMed AirFit N30 en P10. Analyse van gegevens uit de Clinician Ease of Use and First Impression-studie van juni 2020 waarbij n=31. Vergelijking van maskers waar de ResMed AirFit P10 en de ResMed AirFit N30.

Philips Therapy Masker 3100 NC en 3100 SP handleiding voor het aanmeten bij patiënten

Volg de instructies om te beginnen met het aanmeten van het Philips Therapy Masker 3100 NC en 3100 SP



nasal cradle-kussen voor onder de neus

Silicone Pillows



1 Voor het beste resultaat gebruikt u het kleinste kussen dat op de neus past. Houd het kussen voor het gezicht. Controleer of de symbolen L en R rechtop staan en aan de juiste kant.



2 Houd met één hand het kussen tegen de neus en trek de bandjes van de hoofdband over het hoofd.



3 De opening van het kussen bevindt zich direct onder de neusgaten. Op geen enkel moment mag de neus binnen de kussenopening komen.



4 Gebruik de schuifjes om de bovenste bandjes van de hoofdband te verstellen. Trek het schuifje naar links of naar rechts om het strakker of losser te maken.



5 Stel de onderste bandjes af.



6 Het masker moet losjes en comfortabel tegen het gezicht gedrukt zitten.



Bestelinformatie

Aanmeetpakket wereldwijd Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC en 3100 SP		Onderdeelnummer	
Philips Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, GBL		1144608	
Philips Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, GBL		1144610	
Philips Therapy Mask 3100 NC met hoofdband	Onderdeelnummer	Philips Therapy Mask 3100 SP met hoofdband	Onderdeelnummer
Extra small, Philips Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL	1145459	Extra small, Philips Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL	1145464
Small, Philips Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL	1145460	Small, Philips Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL	1145465
Medium, Philips Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL	1145461	Medium, Philips Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL	1145466
Large, Philips Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL	1145463	Large, Philips Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL	1145478
Medium wide, Philips Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL	1145462	Medium wide, Philips Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL	1145467
Philips Therapy Mask 3100 NC zonder hoofdband	Onderdeelnummer	Philips Therapy Mask 3100 SP zonder hoofdband	Onderdeelnummer
Extra small, Philips Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL	1145044	Extra small, Philips Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL	1145055
Small, Philips Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL	1145045	Small, Philips Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL	1145056
Medium, Philips Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL	1145046	Medium, Philips Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL	1145057
Large, Philips Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL	1145047	Large, Philips Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL	1145058
Medium wide, Philips Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL	1145048	Medium wide, Philips Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL	1145059
Philips Therapy Mask 3100 NC reservekussen	Onderdeelnummer	Philips Therapy Mask 3100 SP reservekussen	Onderdeelnummer
Extra small, Philips Therapy Mask 3100 NC, kussen, RP	1145064	Extra small, Philips Therapy Mask 3100 SP, kussen, RP	1145069
Small, Philips Therapy Mask 3100 NC, kussen, RP	1145065	Small, Philips Therapy Mask 3100 SP, kussen, RP	1145070
Medium, Philips Therapy Mask 3100 NC, kussen, RP	1145066	Medium, Philips Therapy Mask 3100 SP, kussen, RP	1145071
Large, Philips Therapy Mask 3100 NC, kussen, RP	1145067	Large, Philips Therapy Mask 3100 SP, kussen, RP	1145072
Medium wide, Philips Therapy Mask 3100 NC, kussen, RP	1145068	Medium wide, Philips Therapy Mask 3100 SP, kussen, RP	1145073
Philips Therapy Mask 3100 NC reserveonderdelen	Onderdeelnummer	Philips Therapy Mask 3100 SP reserveonderdelen	Onderdeelnummer
Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC-SP, frame, RP	1145074	Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC-SP, frame, RP	1145074
Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC-SP, hoofdband, RP	1145075	Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC-SP, hoofdband, RP	1145075
Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC-SP, koppelstuk, RP	1145076	Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC-SP, koppelstuk, RP	1145076
Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC-SP, pasvorm, RP	1145077	Philips Therapy Mask-systeem 3100 NC-SP, pasvorm, RP	1145077
Internationaal Philips Therapy Mask 3100 NC fitpack	Onderdeelnummer	Internationaal Philips Therapy Mask 3100 SP fitpack	Onderdeelnummer
Philips Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, INT	1145038	Philips Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, INT	1145049
Internationaal Philips Therapy Mask 3100 NC reserveonderdelen	Onderdeelnummer	Internationaal Philips Therapy Mask 3100 SP reserveonderdelen	Onderdeelnummer
Philips Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, CE	1145039	Philips Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, CE	1145050
Philips Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, RC	1145040	Philips Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, RC	1145051
Philips Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, AP	1145041	Philips Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, AP	1145052
China, Japan en Zuid-Korea Philips Therapy Mask 3100 NC fitpack	Onderdeelnummer	China, Japan en Zuid-Korea Philips Therapy Mask 3100 SP fitpack	Onderdeelnummer
Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, CN	1145042	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, CN	1145053
Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, JP	1145043	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, JP	1145054
Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, KR	1149794	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, KR	1149795

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar philips.com/professional/3100-NC-SP.