


PHILIPS

Monitorización de
pacientes

Advance Event
Surveillance

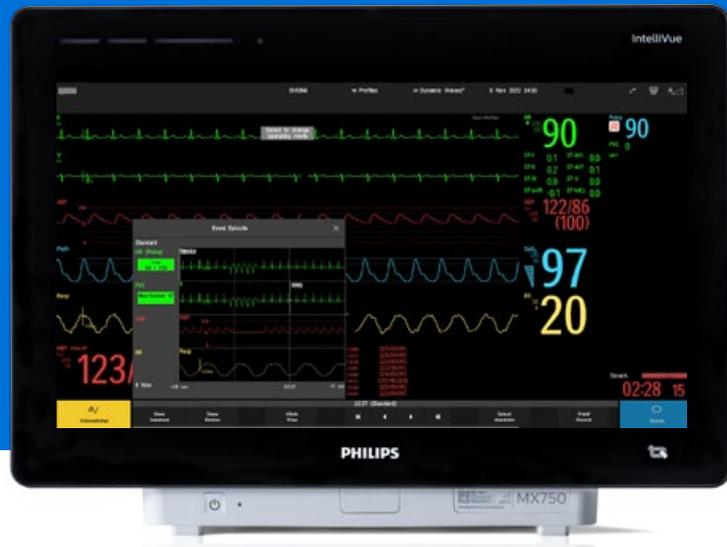

Disponible en la plataforma de monitorización de pacientes de Philips

Combinar varios parámetros en una sola notificación para reducir el índice de falsas alarmas positivas.*

Advanced Event Surveillance analiza las combinaciones de parámetros y umbrales para ayudarle a identificar tendencias clínicas preocupantes.



El reto

Cuando se toman por separado, los cambios en los parámetros fisiológicos pueden no reflejar toda la situación del estado de un paciente. Esto puede desencadenar alertas innecesarias y dificultar la toma de decisiones.



La solución

Advanced Event Surveillance le permite elegir agrupaciones de hasta cuatro parámetros clínicos para registrarlos simultáneamente dependiendo de la condición específica de un paciente. Analiza esa combinación de datos y muestra las tendencias relacionadas.



Las repercusiones

El análisis de datos personalizados activa alarmas útiles cuando se observan tendencias preocupantes. Y en lugar de tener que interpretar múltiples valores individuales en el monitor, los facultativos médicos ven una representación contextualizada que facilita la toma rápida de decisiones.

* Bitan Y, O'Connor MF. F1000Res.2012;2-12;1:45.: N=564 cardiac surgery ICU patient days. Positive predictive value was 171/221 = 0.773.



Personalice las activaciones para una atención médica personalizada



Introduzca un conjunto de valores personalizado para detectar una tendencia en la sepsis (por ejemplo, agrupación de HR90, RR20, PAM = 64 mm Hg y temperatura 38 °C)



Vea fluctuaciones críticas en el balance hídrico combinando las activaciones hemodinámicas adecuadas (por ejemplo, agrupación de la frecuencia cardíaca, presión venosa central y VPP)



Cree su propia alarma inteligente fijando umbrales de desviación y períodos de tiempo (por ejemplo, notificación cuando la FC cambia en más de un 40 % en 60 segundos)



Las herramientas de IntelliVue de soporte a las decisiones clínicas son importantes para los equipos de cuidados intensivos. Nuestras funciones avanzadas de análisis y visualización aportan a los facultativos datos fisiológicos claros y contextualizados en el punto de atención médica.
www.philips.com/clinical-decision-support

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o sus respectivos propietarios.

www.philips.com



0000011-00-00 * Mayo de 2023