


PHILIPS

Monitoraggio
paziente

Sorveglianza Eventi
avanzata

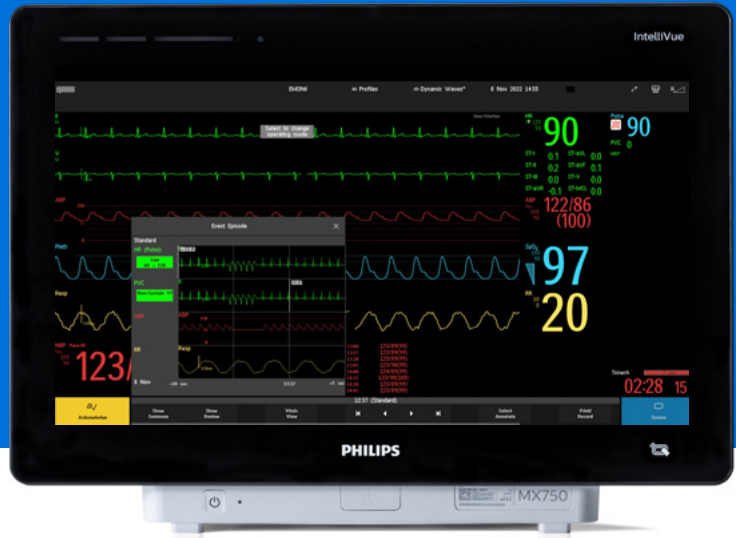

Disponibile per la piattaforma Philips dedicata al monitoraggio del paziente

Combina diversi parametri in una sola notifica per ridurre la percentuale di allarmi falsi positivi*

La funzione di Sorveglianza Eventi avanzata analizza più combinazioni e soglie di parametri per aiutare a identificare pattern clinici preoccupanti.



Il problema

Prese separatamente, le variazioni dei parametri fisiologici possono non fornire il quadro completo delle condizioni di un paziente, provocando allarmi non necessari e ostacolando il processo decisionale.



La soluzione

La Sorveglianza Eventi avanzata ti permette di raggruppare fino a quattro parametri clinici da acquisire simultaneamente in base alle condizioni di ogni paziente, analizzandone i dati e visualizzando i relativi trend.



Il risultato

L'analisi di punteggi assegnati ai dati in maniera personalizzata, attiva allarmi significativi quando si verificano scenari critici. La rappresentazione contestualizzata dei valori facilita il processo decisionale del personale sanitario, che non deve più interpretare una moltitudine di valori singoli dal monitor.

* Bitan Y, O'Connor MF. F1000Res.2012;2-12;1:45.: N=564 giorni paziente di terapia intensiva cardiocirurgica. Valore predittivo positivo di 171/221 = 0,773.



Personalizzazione dei trigger per un'assistenza su misura



Inserisci un set di valori personalizzato per rilevare i casi di sepsi (ad es. raggruppando HR90, RR20, MAP 64 mmHg e temperatura corporea di 38 °C)



Rileva fluttuazioni critiche nel bilancio dei liquidi combinando particolari trigger emodinamici (ad es. raggruppando frequenza cardiaca, pressione venosa centrale e PPV)



Crea allarmi intelligenti su misura impostando soglie di variazione e intervalli temporali (ad es. inviando una notifica in caso di variazione della frequenza cardiaca di oltre il 40% in 60 secondi)



Configurare i gruppi di eventi è semplice e veloce. Una configurazione adeguata rende la nuova funzione di Sorveglianza Eventi avanzata uno strumento prezioso nel monitoraggio dei pazienti."

— Medico presso una rete di strutture sanitarie di grandi dimensioni



Gli strumenti di supporto decisionale clinico IntelliVue non sono mai stati più importanti per i team di assistenza acuta sottoposti a carichi di lavoro eccessivi. Le funzionalità avanzate di analisi e visualizzazione mettono a disposizione del personale sanitario dati relativi a parametri fisiologici ricchi di contesto direttamente nel punto di cura.
www.philips.com/clinical-decision-support

© 2022 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o dei loro rispettivi proprietari.

www.philips.com



0000011-00-00 * Dicembre 2022